Verzió: 1.0.1

LUNA Plus



Felhasználói kézikönyv

Beolvasás
Letöltés

Többnyelvű útmutató

Beolvasás az alkalmazás letöltéséhez


Bevezető

Tisztelt Felhasználók! Őszintén köszönjük, hogy termékünket választották. Ez a füzet fontos biztonsági, jogszabályi és jótállási információkat tartalmaz, amelyeket a használat előtt el kell olvasniuk.

Megjegyzés: Ez a termék nem alkalmas semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére vagy gyógyítására. Ez egy LUNA Plus wellness-készülék, amelyet általános használatra terveztek a relaxáció elősegítése és a kényelem javítása érdekében. Ha bármilyen egészségügyi problémája van, kérjük, forduljon orvoshoz.

A csomag tartalma

- LUNA Plus
- Fülhallgató (bal oldali)
- Fülhegyek (bal, 2 db)
- Permetező palack
- Gélcső
- Töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv
- Gyors útmutató
- Egészségügyi gyakorlatok

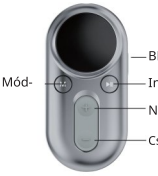

LUNA Plus



Fülhallgató

Utasítások

Külön termékhasználati útmutatót is kínálunk, amelyben további részleteket találhat. A LUNA Plus négy üzemmóddal rendelkezik: **SLEEP, RELAX, MEDIT** és **RELIEF**.

1. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a LUNA Plus teljesen feltöltve van. Csatlakoztassa a töltőkábelét a LUNA Plus készülékhez, és ellenőrizze, hogy a kijelzőn az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelzi-e.
2. Dugja be a fülhallgató kábelének csatlakozóját a LUNA Plus készülékbe.
3. A fülhallgató behelyezésére vonatkozó utasítások:
   a. Törölje le a bal fülét egy alkoholos vagy nedves törlőkendővel, hogy enyhén nedves maradjon.
   b. Töltse meg a spray-palackot vízzel. Tartsa a spray-t körülbelül 10 cm-re a fülhallgatótól. Vagy használhatja az ecsetet is, hogy gélt vigyen fel a fülhallgatóra.
   c. Óvatosan helyezze a fülhallgatót a bal fülére, majd helyezze be a fülébe.
   d. Állítsa be a fülhallgatót úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen a célterületekhez (azaz a jobb oldali képen látható 1. és 2. ponthoz).
   e. Ha a fülhallgató (a fülhegygel együtt) túl nagy a bal füléhez, kérjük, vegye le a fülhegyet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik a fülébe, és hogy érzi a stimulációt.
   f. A klip segítségével rögzítse a fülhallgató kábelét a ruhájához, hogy megakadályozza a fülhallgató leesését.
4. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a LUNA Plus bekapcsolásához, majd az „M” gombbal válassza ki a megfelelő üzemmódot.
5. Állítsa be a LUNA Plus intenzitási szintjét:
   a. A „+” vagy a „-” gombok megnyomásával lassan növelje vagy csökkentse az intenzitást. Ügyeljen arra, hogy ne siesse el ezt a folyamatot. Ha nem érez semmit, segíthet, ha egy kis nedvességet visz a fülébe. Állítsa le vagy csökkentse az intenzitást, ha éles szúró érzést érez.
   b. Állítsa be az intenzitást úgy, hogy kellemes és viszonylag erős bizsergést vagy rezgést érezzen, de ne legyen fájdalom vagy szúró érzés. Ha fájdalmat érez, azonnal csökkentse az intenzitást. Ha az érzés kellemetlen, állítsa be újra a fülhallgató helyzetét.
   c. Minden felhasználó számára más a kívánt szint, és a nagyobb intenzitás nem feltétlenül jobb.
   d. Amint az intenzitás 0 fölé emelkedik, a LUNA Plus elkezdi a működését.
6. A LUNA Plus készüléke most aktív, és a kezelés megkezdődött. Ezt a képernyőn megjelenő visszaszámláló időzítő jelzi.
7. A kezelés időtartamának letelte után a LUNA Plus automatikusan kikapcsol, ha 3 percnél hosszabb ideig nem végeznek vele semmilyen műveletet.



Ábra a fülhallgató viseléséről

- **Alvási mód:** Használja lefekvés előtt vagy szundikáláskor, hogy segítse testét és elméjét a kikapcsolódásban.
- **Relax mód:** Használja stressz, feszültség vagy túlterheltség esetén – bármikor, amikor újra kell indítania magát és le kell nyugodnia.
- **Meditációs üzemmód:** A tudatosság elősegítésére és az energia enyhe növelésére tervezték. A legjobb eredmény érdekében hangolja össze légzését a stimulációval: lassan lélegezzen ki, amikor érzi a stimulációt, és finoman lélegezzen be a szünet alatt.
- **Enyhítő üzemmód:** Nyugtató üzemmód, amely enyhíti a fejben érzett nyomást, és elősegíti a tisztaság és az enyhe könnyedség érzését. Tökéletes azokra a napokra, amikor erősnek érzi a fejét, vagy túlterheltnek érzi magát.

Az intenzitás beállítása a kezelés során

Az intenzitás beállítása:

1. (Szükség esetén) Nyomjon meg bármelyik gombot egyszer, hogy felébressze a kijelzőt.
2. A „+" és „-" gombokkal lassan állítsa be az intenzitást.
3. Fokozatosan növelje az intenzitást egy erős, de kényelmes ~~szintre –~~soha ne legyen fájdalmas. (Előfordulhat, hogy az idegrendszerének néhány kezelésre van szüksége, hogy megszokja az érzést.)
4. A kényelem egyéni kérdés. Válassza ki azt az intenzitást, amely kényelmesnek tűnik Önnek, és a kezelés során végig kényelmes marad.

Megjegyzés: A kényelmes intenzitás kezelésenként változhat az alkalmazkodás, a fülbőrrel való érintkezés minősége, a levegő páratartalma, a fülhallgató kopása/elhasználódása és egyéb tényezők miatt.

A LUNA Plus szüneteltetése a kezelés közben

1. (Szükség esetén) Nyomjon meg bármelyik gombot a kijelző felébresztéséhez.
2. A képernyőn **megjelenik** a hátralévő idő.
3. Nyomja meg az alsó középső gombot a kezelés szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a gombot a kezelés folytatásához.

Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése

Amikor a LUNA Plus be van kapcsolva, a képernyőn megjelenik egy akkumulátor ikon, amely jelzi az akkumulátor állapotát. **Ha** az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a képernyőn megjelenik a **„LOW BATTERY" (Alacsony akkumulátor töltöttség)** figyelmeztetés.

Környezeti feltételek

Hőmérséklet:	**Relatív páratartalom:**	**Légnyomás:**
Üzemeltetés: 5–40 °C Tárolás: –10–45 °C	Üzemeltetés: ≤ 80% relatív páratartalom Tárolás: ≤ 95% relatív páratartalom	Üzemi: 86 kPa – 106 kPa Tárolás: 60 kPa – 106 kPa

Javaslatok:

- Az intenzitást az Ön tűrőképességének és kényelmi szintjének megfelelően állítsa be, ügyelve arra, hogy ne okozzon fájdalmat. Általában ajánlott, hogy minden kezelés 20 percig tartson.
- Ne felejtse el vizet permetezni vagy gélt felvinni a fülhallgató két stimulációs pontjára.
- Ha a bekapcsolás után nem érez semmit, ellenőrizze az Earbud és a füle közötti érintkezést. Ha a fül felülete száraz, permetezzen rá még egy kis vizet, vagy használjon Gel Tube-ot az Earbud-on.
- Ha a bekapcsolás után 3 percig nem történik semmilyen művelet (az edzés ideje kivételével), a LUNA Plus automatikusan kikapcsol.
- Szüntesse be a használatot, ha enyhe szédülést, szédülést, mellkasi fájdalmat vagy túlzott bőrirritációt tapasztal.
- Az alkalmazási helyen jelentkező irritációhoz hasonló reakciók ritkán fordulnak elő. Ha irritáció lép fel, és kellemetlenné válik, szakítsa meg a kezelést. A kellemetlen érzés a kezelés befejezése után röviddel elmúlik. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

Hibaelhárítás

Probléma	Részletek	Megoldás
A képernyő eltűnt	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel Ez órákig is eltarthat
	Automatikus kikapcsolás	Indítsa újra a LUNA-t
A LUNA Plus normálisan működik, de nincs érzés	Gyenge bőrkontaktus a fülhallgatóval	Győződjön meg a megfelelő elhelyezésről a kézikönyvben leírtak szerint
	A kezelés befejeződött	Állítsa vissza a módot , majd indítsa el újra a masszázst
	Ellenőrizze, hogy a fülüreg tiszta-e	Kérjük, tisztítsa meg a fül környékét
Kellemetlen érzés	**Bőrallergia**a fülhallgatóra	Hagyja abba
	Túl magasra van állítva az intenzitás	Csökkentse az intenzitás **szintjét**
	A kezelés időtartama túl hosszú	Szükség szerint csökkentse a kezelés idő ját

Karbantartás és ártalmatlanítás

A termék élettartamát és karbantartását érintő óvintézkedések

- Kérjük, a LUNA Plus készüléket száraz, jól szellőző helyen tárolja, és kerülje a közvetlen napfényt.
- A LUNA Plus készüléket nem hosszú távú használatra tervezték.
- Töltse fel a LUNA Plus készüléket, amint megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy nedvesség ne kerüljön a belső áramkörökbe vagy a LUNA csatlakozókba.
- A mellékelt fülhallgató újrafelhasználható. Az optimális teljesítmény és kényelem biztosítása érdekében ajánlott a fülhallgatót 3–6 havonta cserélni.

Ápolás, karbantartás és tárolás

- A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a LUNA Plus ki van kapcsolva.
- A LUNA Plus és a fülhallgató tisztításához óvatosan törölje le őket egy puha ruhával vagy papírkendővel. Használhat enyhén vízzel vagy enyhe szappanos oldattal megnedvesített ruhát is. Szárazon is letörölheti őket. Ne áztassa és ne merítse vízbe a LUNA Plus készüléket vagy a fülhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy a LUNA Plus ne essen le, ne sérüljön meg, és ne merüljön vízbe.
- A tisztításhoz kizárólag szappant vagy vizet használjon; ne használjon más tisztítószereket.
- Ne a kábelt húzza meg a fülhallgató eltávolításához.
- Tartsa a LUNA Plus készüléket távol a gőztől, a víztől és más folyadékoktól.
- A LUNA Plus készüléket biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
- Kerülje a LUNA Plus túlzott hőhatásnak való kitettségét.
- Ne nyissa ki, ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani vagy módosítani a LUNA Plus készüléket. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ha a LUNA Plus nem működik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal: support@zenowell.ai.
- Tartsa a LUNA Plus készüléket legalább 1 méter távolságra az erős mágneses mezők forrásaitól, például mikrohullámú sütőktől vagy hi-fi hangszóróktól.
- A LUNA Plus-t nem szabad gyúlékony anyagok közelében használni.

A termék ártalmatlanítása

Ha a terméket már nem használja, és ártalmatlanítani kell, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

- Gyártói újrahasznosítás: Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, és küldje vissza a terméket, hogy a gyártó újrahasznosítsa és megfelelően ártalmatlanítsa.
- **Saját kezű ártalmatlanítás:** A termék ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy a LUNA Plus ki van kapcsolva, majd vegye ki az akkumulátort. A kivett akkumulátort vigye el egy **helyi** elektronikus hulladék-újrahasznosító központba vagy kijelölt újrahasznosító helyre a biztonságos ártalmatlanítás és újrahasznosítás érdekében.

A LUNA Plus tesztelése

A LUNA Plus teszteléséhez győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje legalább egy sávot mutat, majd nyomja meg a bekapcsológombot. A kijelzőnek bekapcsolódnia kell, és a működés során folyamatosan működőképesnek kell maradnia.

A fülhallgató tesztelése

Minden kezelés előtt tesztelheti a fülhallgatót és a kábel csatlakozását úgy, hogy fokozatosan növeli az intenzitást, amíg bizsergést vagy rezgést nem érez. Az intenzitás növekedésével egyenletes bizsergésnek vagy enyhe rezgésnek kell jelentkeznie. **Ha** az érzés szabálytalan vagy egyenetlen, előfordulhat, hogy a fülhallgató vagy a kábel meghibásodott. Meghibásodás esetén, vagy ha a fülhallgató nem működik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

Abszolút ellenjavallatok

- Olyan személyek, akiknek epilepsziás előzményeik vannak, vagy akiknél epilepsziát diagnosztizáltak.
- Beültetett pacemakerrel, **életfenntartó orvosi** eszközökkel vagy fémimplantátumokkal rendelkező felhasználók.
- Terhes személyek, 18 év alattiak, valamint azok, akiknél érzékszervi rendellenességek vagy a fülkörnyéken túlzott bőrérzékenység áll fenn.
- Súlyos szívbetegségben szenvedő, illetve súlyos szívritmuszavarok kockázatának kitett személyek.
- Nyílt sebekkel vagy gyulladással a fülkörnyéken rendelkező felhasználók.
- Magas hőmérsékletű, gyúlékony környezetben vagy erős elektromágneses sugárzás mellett nem ajánlott a használata.

Óvintézkedések

- Gondoskodjon arról, hogy a fülhallgató szilárdan és egyenletesen érintkezzen a füllel.
- Kizárólag a **bal** fülön használja; ne helyezze más testrészekre.
- Kizárólag a mellékelt fülhallgatót és kábeleket használja. Nem eredeti vagy nem kompatibilis kiegészítők használata a LUNA Plus meghibásodásához vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet.
- Ne használja a fülhallgatót fürdés, zuhanyozás vagy úszás közben.
- A LUNA Plus töltéséhez kizárólag olyan hálózati adaptert használjon, amelynek kimeneti teljesítménye nem haladja meg a 15 W-ot.

Segíthetünk

Örülünk, hogy csatlakozott családunkhoz, és szívesen segítünk, ha szüksége van ránk. **Ha** bármilyen kérdése van, kérjük, keresse meg a választ a Súgóban.

Ha nem találja meg a keresett választ, bátran forduljon hozzánk.

Garanciális információk

LUNA Plus ONE (1) év korlátozott jótállás
Cégünk a LUNA Plus hardvertermékre (a „Termék") az eredeti kiskereskedelmi vásárlás dátumától számított EGY (1) ÉVIG („Garanciális időszak") anyag- és gyártási hibákra vonatkozó garanciát vállal, feltéve, hogy a Terméket a közzétett útmutatásainknak megfelelően használják.

Ezek az irányelvek magukban foglalják – de nem korlátozódnak – a műszaki specifikációkat, a biztonsági utasításokat és a gyorskezelési útmutatót. Cégünk nem garantálja a Termék zavartalan vagy hibamentes működését, és nem vállal felelősséget a használati utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Ez a jótállás nem terjed ki
- A rendellenes vagy helytelen használatból, gondatlanságból, gondosság hiányából vagy véletlen károsodásból (például horpadások) eredő károk.
- Bármilyen jellegű közvetett károkat.

Fülhallgató-garancia

Felhívjuk figyelmét, hogy a fülhallgató fogyóeszköznek minősül, ezért nem tartozik az EGY (1) ÉVES jótállás vagy a kiterjesztett jótállás hatálya alá. Ugyanakkor a vásárlás napjától számított 60 napig jótállás vonatkozik rá gyártási hibák esetén. Ezen időszak letelte után a fülhallgatóra már nem vonatkozik a jótállás.